

RU-919R

Magic Crush

Kullanma Klavuzu

Tanım : Magic Crush

Model : RU-919R

Üretici Firma :

Manufacturer: **Guangzhou Cynthia Beauty Equipment Co.,Ltd**
3 Floor, 3 Building, Shunxiang Industrial Zone, Jiahe Street, Baiyun

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

☎ 0850 255 42 42



Değerli Müşterimiz, Ürünü mü zü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha iyi kullanım ve güvenlik için lütfen herhangi bir işlem den önce bu kılavuzu okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Teori

1. Titreşimli Masaj Probu

Kas ağrısını hafifletmek, sert kemikleri ve eklemleri gevşetmek, ağrıyı hafifletmek için yüksek titreşim ve ısıtma enerjisi kullanır.

Manyetik alanlı titreşimli masaj başlığı manyetik alan üretir, titreşim ve ısı aynı anda çalışabilir. Sağ baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, bel ve boyun ağrısı ve diğer semptomlar önemli ölçüde iyileşmiş ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Nabızı epidermis ve dermis, hatta deri altı yağ dokusu altında doğru bir şekilde ısıtılabilir, bu da anında doku kasılması ve uzun süreli kolajen üretimi ile sonuçlanır.

2. Vakumlu RF Probu (Büyük, Orta, Küçük)

Vücut ve yüzün yeniden şekillendirilmesi için. Kilo kaybı Vakum + RF yağ patlama makinesi doku metabolizmasını teşvik edebilir, farklı derinliklerde yağ granülü yapan ve şok edici füzyon enerjisi yapan selülitite itebilir ve en derin reseptör 3CM kalınlığında ciltte granül alabilir ve hızlı genişleme ve elastik sınırları aşan hücre duvarının hızlı ısınması ve kırılan hücreler ortaya çıkar, böylece yağ asitlerinin yanması aynı zamanda bir tencereden kırılr, sadece yağ asitlerinin yanma tüketimi değil, aynı zamanda daha doğrudan boşaltma da granül boyutunu hızla azaltır.

Aksesuar listesi

Aksesuar	Miktar
Makine çerçevesi	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Vakum RF Büyük sap	1 adet
Vakum RF Orta sap	1 adet
Vakum RF Küçük sap	1 adet
Vakum emme hortumu	1 adet
Titreşimli ısıtma sapı	1 adet
BIO sap	1 adet
Güçlü Sihirli Sap	1 adet
Lipo lazer pedleri (Büyük)	6 adet
Lipo lazer pedleri (Küçük)	2 adet
Lipo lazer bandaj	1 set
Demir Merdane	1 adet
Aksesuar tutucu	1 set
Kullanıcı kılavuzu	1 adet

Bakım servisi

1. Cihaz, aksesuarlar ve sarf malzemeleri hariç bir yıl garanti kapsamındadır. Garanti süresinden sonra bakım hizmeti vereceğiz, ancak ücretli olacaktır.
2. Sarf malzemelerini ve aksesuarları yenilemek veya satın almak istiyorsanız lütfen tavsiye için distribütörle iletişime geçin.
3. Aşağıdaki gibi insan kaynaklı arızalar garanti kapsamımız dışındadır.
 - A. Cihazın müşterinin kendisi tarafından sökülmesi veya dönüştürülmesi nedeniyle arıza meydana gelebilir.
 - B. Hatalı veya mantıksız bakımdan kaynaklanan arıza.
 - C. Cihazın darbe alması veya düşürülmesi arızaya neden olur.
 - D. Yanlış kullanımdan kaynaklanan arıza.
4. e. Deprem, yangın felaketi gibi karşı konulmaz felaketlerden kaynaklanan hasarlar. Her türlü yorum ve öneriye hoş geldiniz.

3. BIO Probu ile Işık Biyo-enerji dalgaları, birçok fizik elektron sinerjistik etkileşimi altında, farklı frekanslar ve darbeler kullanarak, vücudu karşılık gelen noktaları üretmeye teşvik etmek için alet elektrotları aracılığıyla dalgalanır, karşılık gelen noktaları uyarır, vücudu hareket ettirir ve böylece yanar. yine kalori ve yağ. Aynı zamanda kırmızı ışık stimülasyon enerjisinin kullanımı, metabolizmayı hızlandırır, kan ve lenfatik dolaşımı teşvik eder, serbest yağ asitlerinin atılmasını hızlandırır.

4. Güçlü Sihirli Prob RF titreşimle, güçlü nüfuz edilebilirliğe sahip ultrasonik üretir. Alternatif bir dalga yayıp etrafa yayılabilen özel bir alettir. RF, iyi yönlülük, güçlü nüfuz edilebilirlik ve mükemmel genişletilebilirlik ile normal sonik dalgadan çok daha güçlüdür. RF titreşim nedeniyle cilt hücrelerine yumuşak ve mikro masaj yapacak, Sıvı dolaşımını hızlandıracak, metabolizmayı kolaylaştıracak, hücreleri aktive edecek ve besinlerin emilimini artıracaktır.

5. Lazer lipoliz pedleri Lazer lipoliz, yağ hücrelerinde kimyasal bir sinyal oluşturan, depolanan trigliseritleri serbest yağ asitlerine ve gliserole parçalayan ve bunları hücre zarlarındaki kanallar yoluyla serbest bırakan düşük seviyelerde lazer enerjisi yayar. Yağ asitleri ve gliserol daha sonra vücutta metabolizma sırasında enerji üretmek için bunları kullanacak dokulara taşınır. Bu yağ asidi salınımı süreci, vücudun depolanmış enerji rezervlerini kullanması gerektiğinde vücudun doğal bir tepkisidir, dolayısıyla Lazerlipoliz vücutta doğal olmayan herhangi bir reaksiyon yaratmaz ve cilt, kan gibi çevredeki yapıları etkilemez veya zarar vermez. gemiler ve

periferik sinirler. işlemden sonra bir süre egzersiz yapılması, metabolizmanın tamamlanmasını ve böylece serbest kalan yağ asitlerinin vücuttan atılmasını sağlayacaktır.

6. Demir Rulo

Vücut zayıflamasında daha iyi bir etki yaratmak için silindir ve uzak kızılötesi ısıyı kullanarak. Yağ birikintilerinin parçalanmasına, yağlardan ve vücut kıvrımlarından kurtulmaya yardımcı olur. Vücut şekillendirme, sıkılaştırma işlemlerini aynı anda hiç acı çekmeden yapabilir.

Özellikler ve İşlevler

Özellikler

1. Kanama, şişme ve kan durması olgusuna neden olmaz. Yan etkileri ve
2. verilen kiloları geri alma riski olmadığına sonuçlar oldukça açıktır.
3. Non-invaziv işlem normal iş ve yaşamı etkilemez.

Fonksiyonlar

1. Kolları, bacakları, uylukları, kalçaları, bel, sırt, karın kaslarını sıkılaştırın ve vücut figürünü yeniden şekillendirin.
2. Portakal kabuğu benzeri yağ dokularını farklı ciddi seviyelerde iyi
3. edin. Yatıştırıcı, dekompresyon ve etkileriyle cilt dokusunun düzenli mekanik aerobik egzersizini teşvik eder, stresi hızla azaltır ve yorgunluğu giderir.
4. Hücreleri dolaştırın ve etkinleştirin, metabolizmayı teşvik edin ve böylece cildi iyileştirmek için %100 daha fazla kolajen ve elastik lif elde edilebilir.

Rulman

Ana arayüzde “Silindir” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.




Müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı yoğunluk ve ısı yoğunluğunu seçin. Silindir için kullanılabilecek 3 mod da mevcuttur.

Fark etme:

Kullanım sırasında silindirin her iki yanından sıkıca tutulması gerekir.

Lazer Lipoliz

Ana arayüzde “Lazer Lipolisis” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

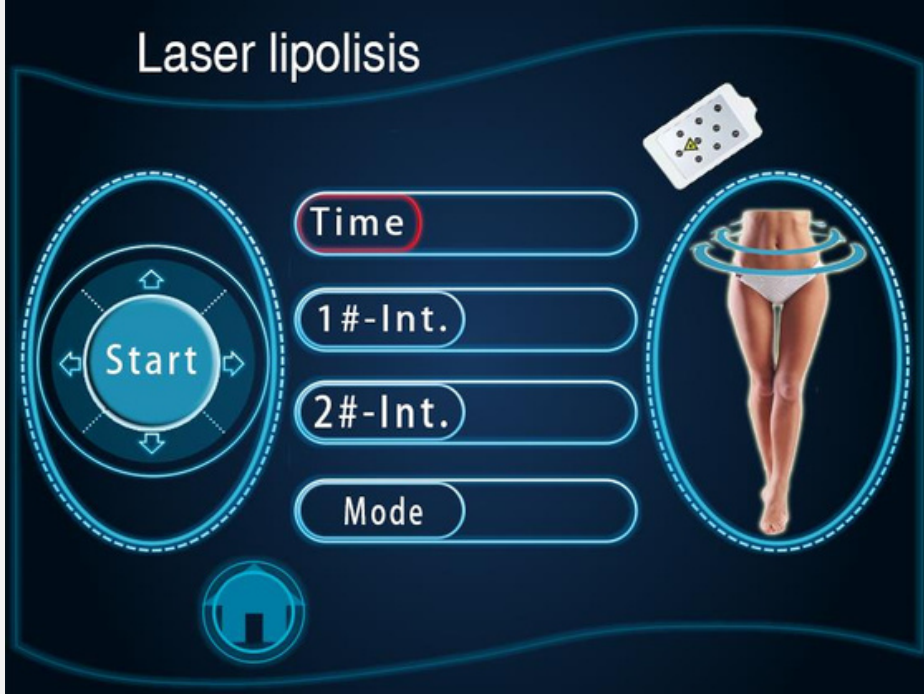


Lipo lazer pedleri için farklı çalışma yoğunluğu ve modu seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “başlat” butonuna bastığınızda lazer lipoliz çalışmaya başlayacaktır. 1# 4 çıkışı kontrol eder ve 2# aynı anda diğer 4 çıkışı kontrol eder. Uygun bir seviyeye ayarlayın (müşterilerin kabul edilebilirliğine göre).

İşlem Prosedürleri



(Açılış arayüzü)

Makineyi açtığınızda arayüzü yukarıdaki gibi gösterecektir; her konuma bastığınızda arayüz aşağıdaki gibi görünecektir.

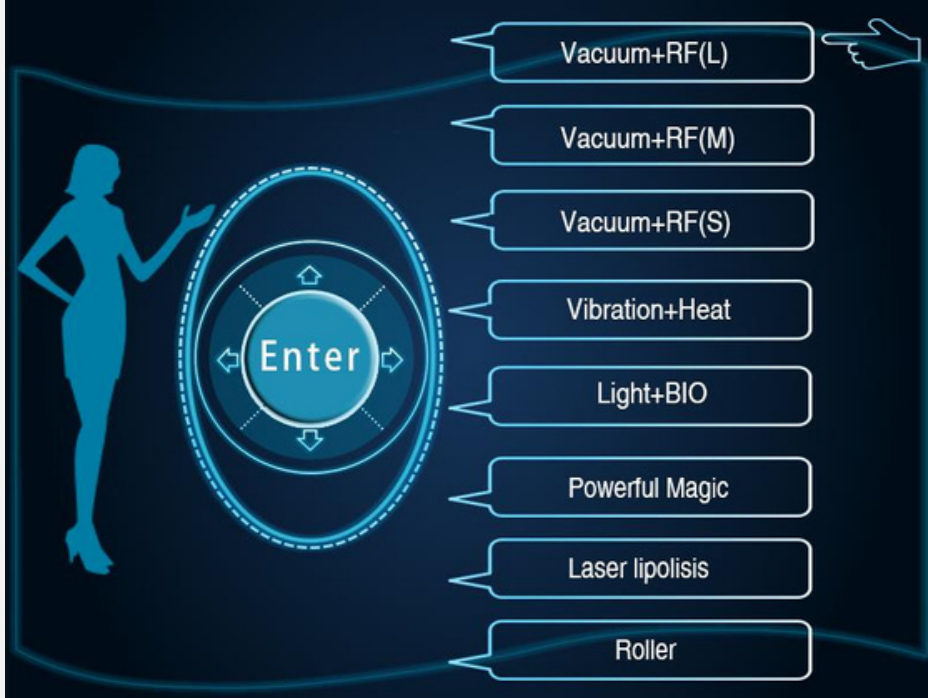

(Ana arayüz)

4. Günlük toplam işlem süresi 30 dakika içinde olmalıdır.

5. Yüksek ısıdan kaynaklanan hasarları önlemek için yüksüz duruma getirilmesine izin vermeyin.

6. Güzellik uzmanı, cilt üzerinde, daire şeklinde veya kısa çizgide tekrar tekrar yavaşça hareket etmek için güçlü sihirli probu tutar.

7. Anjiyokardiyopatili, kanamalı hastalığı olan, yarası olan hasta ve hamile kadın bu cihazı kullanmamalıdır

8. Probları temiz ve kuru tutun. Suyla yıkamayın, dezenfekte etmeyin ve pamukla temizlemeyin, probları düşürmeyin veya çarpmayın.

9. Probları herhangi bir işlem yapmadan çalıştırmayın, aksi halde makine bozulabilir.

10. Hipohepati, siroz ve böbrek problemi olan kişiler bu makineyi kullanamaz.

Uyarı:

1. Makineyi kullanmayan kişiler:

2. Hamile kadınlar veya regl dönemindeki kadınlar.

3. Epileptik.

4. Malignitesi olan hastalar.


Güçlü Sihir

Ana arayüzde “Powerful Magic” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.




Vakum+RF(L/M/S)

Ana arayüzde “Vakum+RF(L/M/S)” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

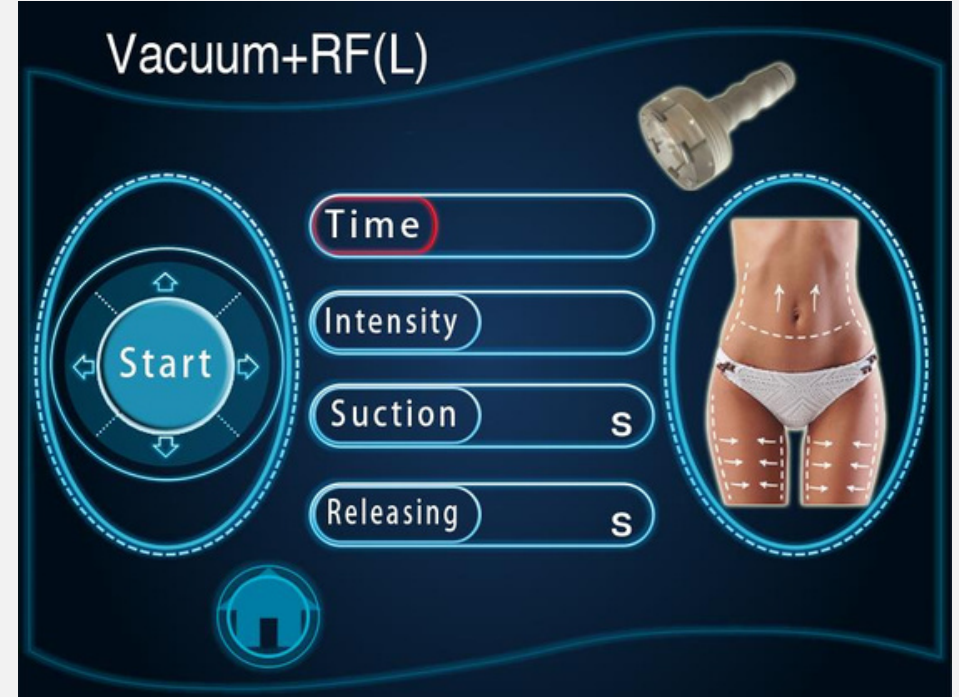

(Vakum RF L)

1. Farklı Çalışma süresi, yoğunluk ve mod seçin. Yoğunluğu seçin küçükten büyüğe. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “Başlat” düğmesine basın. sonda çalışmaya başlayacaktır.
2. İşlem yapılması gereken cilde yeterli miktarda jel uygulayınız.
3. Sapın güçlü geçirgenliği nedeniyle vücudunuzun hiçbir yerinde hareketsiz kalmayın, kemiklerin üzerinde kalmayın.

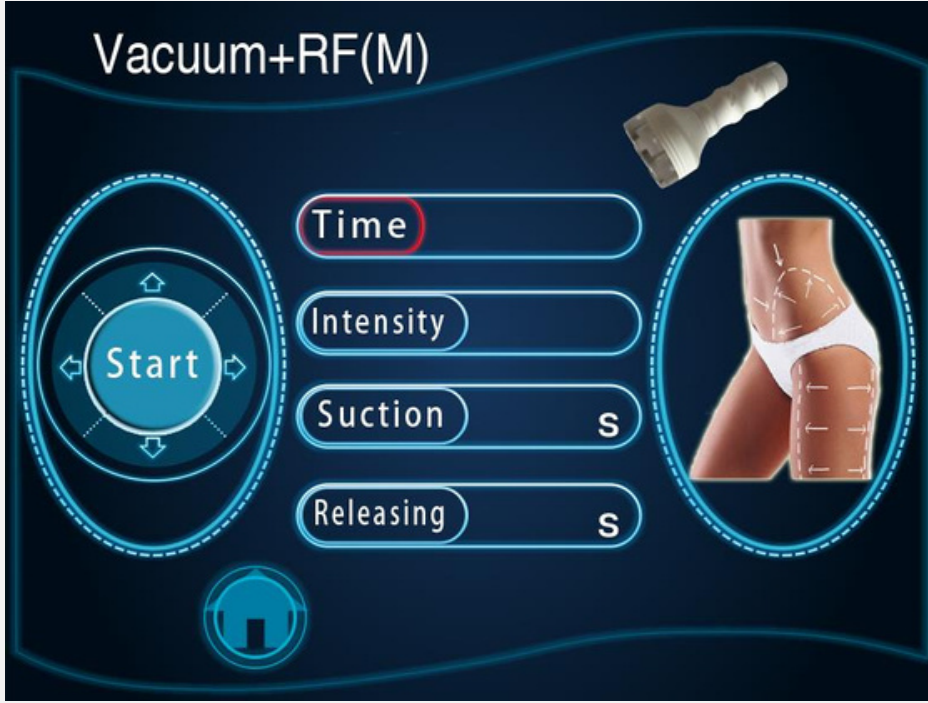


(Vakum RF M)

RF yoğunluğu için yoğunluk

Aspirasyon için emme, aspirasyonu kullandığınızda devam eder Her emme arasındaki aralık süresi için serbest bırakma

Işık ve BIO


Ana arayüzde “Light and BIO” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

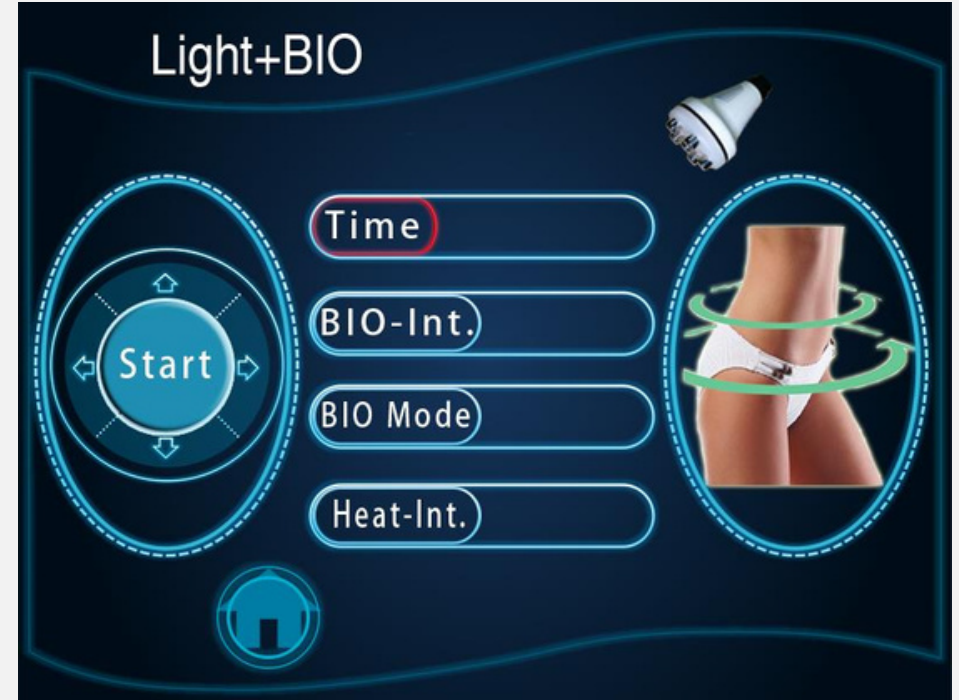


Farklı Çalışma süresi, titreşim yoğunluğu, titreşim modu ve ısı yoğunluğunu seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “Başlat” düğmesine bastığınızda prob çalışmaya başlayacaktır. Çalıştırma kılavuzu Vakum RF koluyla aynı olmalıdır. Her kullanımdan sonra sapı uygun şekilde temizleyin.

Titreşim ve Isı

Ana arayüzde “Titreşim ve ısı” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

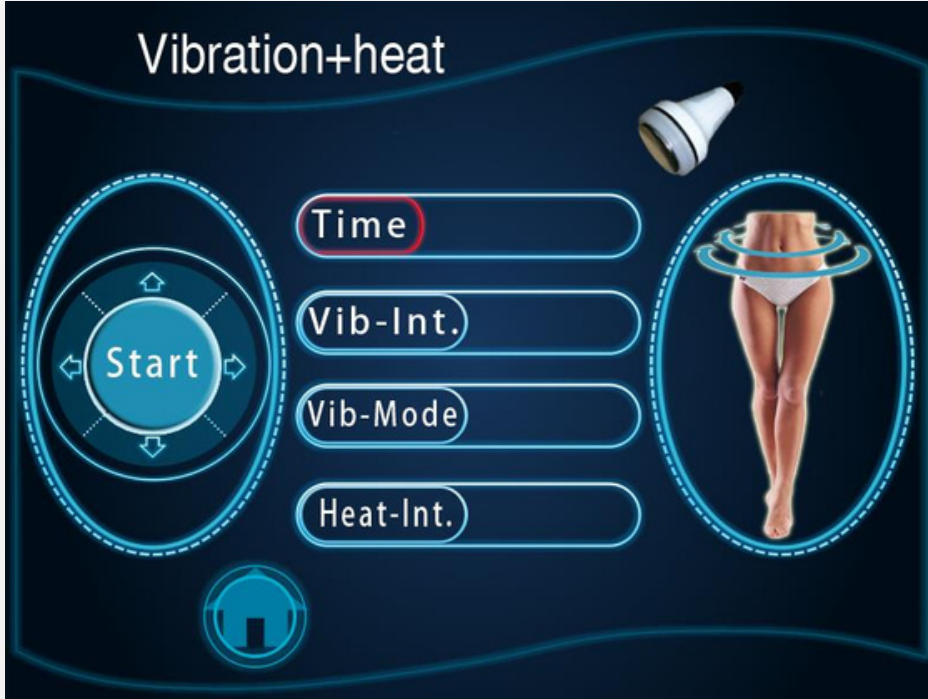

Farklı Çalışma süresi, titreşim yoğunluğu, titreşim modu ve ısı yoğunluğunu seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “Başlat” düğmesine bastığınızda prob çalışmaya başlayacaktır. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uygun ısıtma yoğunluğunu seçin. Çalıştırma yöntemi Vakum RF kollarıyla aynıdır.

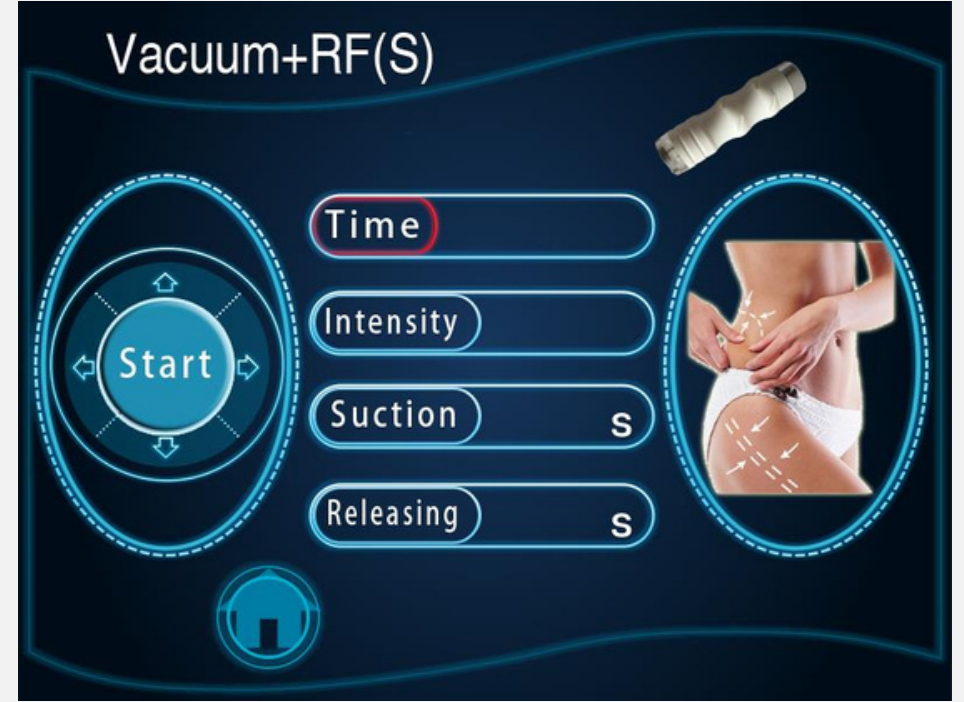

(Vakum RF S)

Seçimleriniz için 3 farklı boyutta Vakum RF kulpları vardır. Müşterilerin işlem alanına göre farklı problemleri seçin. Farklı Çalışma süresi, Yoğunluk ve emme serbest bırakma süresi seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “Başlat” düğmesine bastığınızda prob çalışmaya başlayacaktır. Hangi vakum RF kolunu seçeceğinize göre hortumu kola bağlayın.

1. Proba jel uygulayın, kilo verme pozisyonuna getirin ve çalıştırın. çekme tekniğinde (kilo verme pozisyonundaki yağı pozisyona sürükleyin) lenf bezine daha yakın olduğu yerde) yaklaşık 20 dakika boyunca.
2. Kullanım sırasında düşük enerjiyle başlayın. Müşterilerin vücudunda kullanmadan önce ellerinin üst kısmında uygun enerji seviyesini denemenizi öneririz.
3. Çalışırken, yalnızca Vakumlu RF sapı cilde takıldıktan sonra çekmeye başlayın. Kullanılmadığı zaman alet probunu kapatın.

Kullanım Kılavuzları

UYLUK

işlem süresi: 30 dakika

1. Lenfleri taramak için aşağıdan yukarıya doğru kasıklara doğru itin.
 2. Aşağıdan yukarıya doğru, saat yönünün tersine dairesel bir itme, yağların ayrışmasına yardımcı olabilir.
 3. Ayrıca gelip-giderek şişmanlığı ayrıştırabilir.
 4. Dizden ve kas dokusundan yukarıya doğru çekin, eğriyi iyileştirebilir.
 5. işlem süresi: 20 ila 30 dakika
1. Lenf yönünde bele doğru çekilerek.
 2. Yukarıdan aşağıya, saat yönünün tersine bir hareketle gelip git hareketini yapın.
 3. Kol kasını yukarı doğru çekerek kasları kaldırın ve sıkın.

GERİ işlem süresi: 20 ila 30 dakika

1. Önce gel-git şeklinde mesane sinirini 2-3 kez iterek.
2. Koltuk altı lenf düğümünü uyarmak için saat yönünün tersine daire çizin.
3. Arka tarafta saat yönünün tersine daire çizerek yağın parçalanmasına yardımcı olabilir.

4. Lenf drenaj hareketini kullanarak toksini lenf düğümüne çekin, sırt eğrisinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

ARKA YAN

1. Dirsek iç kısmından koltuk altına kadar lenf drenajı yapılması.
2. Lenf düğümünü uyarmak için daire çizin.
3. Saat yönünün tersine veya gelip-giterek iterek, yağları ayrıştırın.
4. Dirsekten öküze kadar sıkma hareketi yapmak.

Cephe

1. Dirsekten öküze kadar sıkma hareketi yapmak.

Karın işlem süresi: 20 ila 30 dakika

1. Küçükten büyüğe doğru saat yönünde göbek deliği etrafında dönmek kalın bağırsağın peristaltizmine yardımcı olabilir.
2. Küçükten büyüğe, saat yönünün tersine, daire çizerek aşağı doğru bastırın.
3. Göbek ve kas dokusundan kasıklara doğru çekin.
4. Lenf drenaj hareketi ile toksinin kasık bölgesine götürülmesi.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.
NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :


EAST MEDİKAL
MEDICAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. YakamoZ Cd. No:C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : Defond

Modeli : RU-919R

Cinsi : Magic Crush

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşulları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. SU SIÇRAMALARI Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1.Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamayacağı sürekli olması,

2.Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

3.Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

6.Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.